

# *i*Rest™

*SL-A12Q* Массажное кресло

# *i*Rest™

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ



***i*Rest™**

Поставщик товаров торговой марки iRest на территории России  
ООО "ТРГ"  
тел.: +7 842 354 56 36  
e-mail: irest@bk.ru

**ИНСТРУКЦИЯ - ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ**

**ТРГ**


[www.ru-irest.ru](http://www.ru-irest.ru) e-mail: [irest@bk.ru](mailto:irest@bk.ru)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 5. Защита пола.

Длительное использование кресла на деревянном полу может повредить пол. Во избежание этого используйте ковер или другое покрытие.

Предостережение: Не передвигайте кресло с помощью колесиков по деревянному полу, земле или в узком пространстве. Поднимите кресло для перемещения.

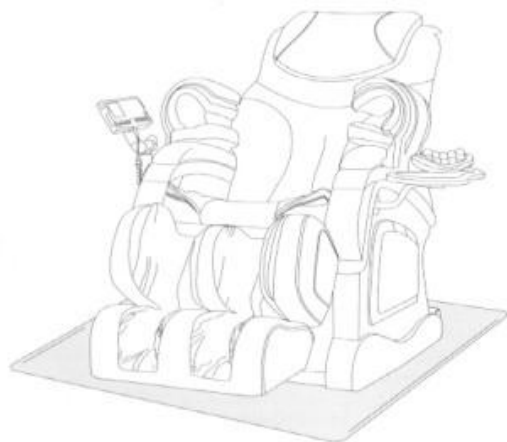

## ФУНКЦИИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Все виды массажа спины: Шиатцу, разминание, похлопывание, поколачивание, комбинированный (разминание и похлопывание одновременно), роликовый (вытяжка позвоночника), вибромассаж.

Перед массажем проходит процесс сканирования – четырёхроликовый массажный механизм изучает индивидуальные особенности контуров позвоночника, что делает массаж более эффективным.

Возможность изменения скорости массажа (5 уровней).

Возможность изменения высоты роликов по уровню шеи и плеч (5 уровней).

При массаже способом похлопывания, шиатцу, и постукивания возможно устанавливать 3 уровня ширины воздействия роликов по ширине спины.

Кресло имеет два режима управления: автоматический и ручной.

5 профессиональных автопрограмм:

1. "Релакс" – массаж всей верхней части тела, включает в себя массаж шейного отдела, спины и поясницы. Установочное время – 15 минут.

2. "Активный" – помимо массажа всей верхней части тела, осуществляется точечный массаж плеч, спины и поясницы. Установочное время – 38 минут.

3. "Легкий" – К массажу плеч, спины и поясницы подключаются другие массажные функции для расслабления боли в плечах, спине и пояснице. Установочное время – 30 минут.

4. "Забота о теле" – к глубокому массажу всей верхней части тела, спины и поясницы подключаются другие массажные функции для расслабления наиболее активных точек всего тела. Установочное время – 15 минут. для того, чтобы массаж был более точечным.

5. "Комфорт" – в этой программе учтены все самые важные массажные функции. Верхняя часть тела делится на 16 массажных точек, при этом глубокий массаж осуществляется в выбранной Вами точке, области тела, для того, чтобы массаж был более точечным. Снижает боль в мышцах и стимулирует точки, расположенные около позвоночника. Установочное время – 8 минут.

6 дополнительных автопрограмм: массаж плеч, массаж шеи, массаж поясницы, частичный, точечный и массаж шести заданных точек.

Функция вытяжки позвоночника.

Массаж рук.

Ручной режим обеспечивает возможность самостоятельного выбора вида массажа, его интенсивность, скорость и область воздействия. Возможны 6 вариантов массажа в ручном режиме (массаж фиксированный, частичный, общий, плеч, спины и поясницы).

## ФУНКЦИИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Установка времени. Возможность установления времени выполнения массажа в ручном режиме (15, 20 и 30 минут).

Массаж нижней части тела (массаж сидалища, бедер, икр, голеней и акупунктурный массаж стоп). Функция воздушно-компрессионного массажа нижней части тела обеспечивается 66 воздушными камерами.

Вибромассаж проходит в трёх режимах: интенсивном, умеренном и без виброэффекта.

MP 3 – плеер.

Новейшая функция «Синхронизация» - выполнение массажа в такт музыки, оказывает дополнительный расслабляющий эффект.

Возможность корректировки цвета дисплея: ручная установка цвета. Предполагает выбор цвета из 8 вариантов.


Нефритовый проектор. Предназначен для использования во время остаточных явлений после воспалительных процессов, ушибов, порезов. Возможность изменения температуры нагревания нефритового проектора от 40 до 70 С.

Кнопка автоматического включения (Будильник). Время автоматического включения может быть установлено до 8 часов.


Предназначение

- устраняет усталость
- облегчает боль в мышцах
- снимает напряжение в мышцах
- снимает нервную и мышечную усталость

## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

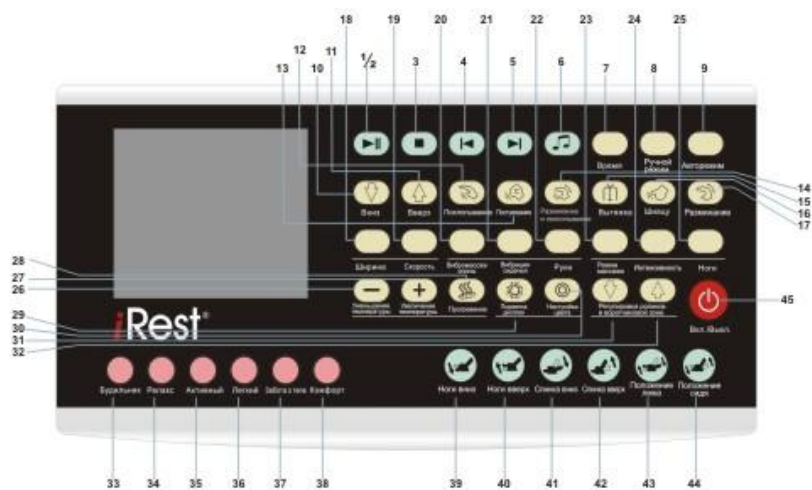

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

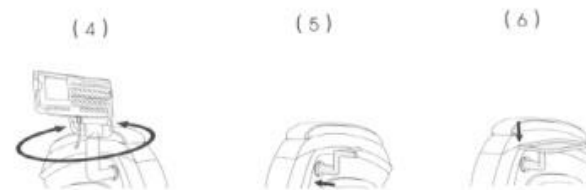

### 4. Запрещенные действия:

1. Не смазывайте крепежный механизм маслом при присоединении к креслу отделения для рук.
2. Не наносите вред воздушным подушкам иглой или другими острыми предметами.
3. Запрещается расшатывать воздушные подушки, так как это может повредить крепежному механизму.


Использование:

1. Если шпindel крепления отделения для рук вставлен в отверстие наполовину, то, при включении кресла, воздух будет просачиваться; если шпindel вставлен полностью, то воздушная подушка начнет работать.
2. Если шпindel для крепления воздушной подушки вынут, но не до конца, воздух также будет просачиваться.
3. Колесико закручивается по часовой стрелке и раскручивается против часовой стрелки.
4. Если вы хотите полностью снять отделение для рук, убедитесь, что оно свободно двигается вперед и назад.
5. Чтобы избежать удара отделения для рук об спинку кресла, подвиньте отделение от себя на 20° так, как это показано на рисунках (1) и (2).





## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

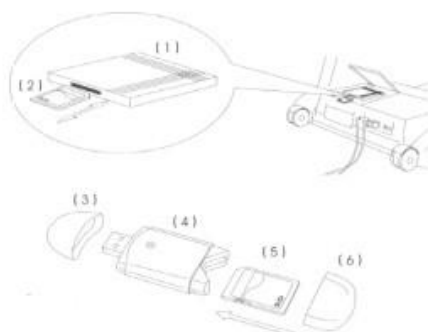

- (1) Коробка MP3 плеера.
- (2) SD карта
- (3) Передний колпачок записывающего устройства для SD карты.
- (4) Записывающее устройство для SD карты.
- (5) SD карта
- (6) Задний колпачок записывающего устройства для SD карты.

### 2. Регулировка и применение накидки и подушки кресла.

Вы можете использовать или снять накидку, которая может ослабить действие массажа шеи и плеч способом растирания, по вашему усмотрению (рекомендовано использовать накидку).


Накидка кресла присоединяется к спинке кресла при помощи молнии (1). Подушка присоединяется к накидке при помощи липучки (2).

**Предупреждение:** Не используйте кресло без накидки, так как это может причинить вам вред.



### 3. Установка и использование пульта управления и мини-столика.

Установите на кресло подставку под пульт управления (1) вставьте пульт управления в подставку (2). Пульт управления может свободно наклоняться (3) и вращаться (4). Установите на кресло подставку под мини-стол (5) поставьте мини-стол на подставку (6).

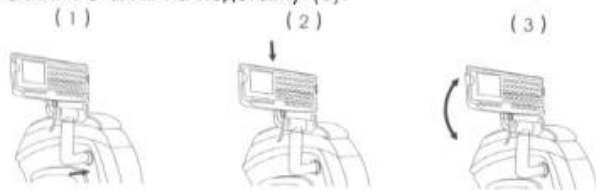

## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

- 1) Включить музыкальное сопровождение;
- 2) Пауза;
- 3) Остановить музыкальное сопровождение;
- 4) Переключение треков назад;
- 5) Переключение треков вперед;
- 6) «Синхронизация» - выполнение массажа в такт музыке;
- 7) «Время» - установка времени массажа;
- 8) «Ручной режим» - включение ручного режима массажа;
- 9) «Авторежим» - включение автоматического режима массажа;
- 10) «Вниз» - перемещение массажного механизма «вниз» (кнопка доступна в ручном режиме массажа);
- 11) «Вверх» - перемещение массажного механизма «вверх» (кнопка доступна в ручном режиме массажа);
- 12) «Похлопывание» - массаж похлопывание;
- 13) «Постукивание» - массаж постукивание;
- 14) «Разминание и похлопывание» - комбинированный массаж (разминание и похлопывание);
- 15) «Вытяжка» - роликовый массаж (вытяжка позвоночника);
- 16) «Шиацу» - массаж шиацу;
- 17) «Разминание» - массаж разминание;
- 18) «Ширина» - регулировка роликового механизма по ширине;
- 19) «Скорость» - регулировка интенсивности массажа спины;
- 20) «Вибрация спины» - включение/выключение вибромассажа спины;
- 21) «Вибрация сиденья» - включение/выключение вибромассажа сиденья;
- 22) «Руки» - включение/выключение массаж рук;
- 23) «Режим массажа» - выбор вида воздушного массажа нижней части тела;
- 24) «Интенсивность» - регулировка интенсивности массажа нижней части тела;
- 25) «Ноги» - включение/выключение воздушного массажа нижней части тела;
- 26) «Уменьшение температуры» - уменьшение температуры нефритового проектора;
- 27) «Увеличение температуры» - увеличение температуры нефритового проектора;
- 28) «Прогревание» - включение/выключение нефритового проектора;
- 29) «Подсветка дисплея» - выбор фоновой подсветки дисплея (8 вариантов);
- 30) «Настройка цвета» - выбор фона дисплея (2 варианта);
- 31) Изменение фиксатора положения роликового механизма по уровню шеи и плеч «вниз»;
- 32) Изменение фиксатора положения роликового механизма по уровню шеи и плеч «вверх»;
- 33) «Будильник» - кнопка автоматического включения массажного кресла;
- 34) «Релакс» - автопрограмма «Релаксирующий массаж»;
- 35) «Активный» - автопрограмма «Оздоровительный массаж»;
- 36) «Легкий» - автопрограмма «Физиотерапевтический массаж»;
- 37) «Забота о теле» - автопрограмма «Массаж снимающий усталость»;
- 38) «Комфорт» - автопрограмма «Комфортный режим»;
- 39) «Ноги вниз» - опустить отделения для ног;
- 40) «Ноги вверх» - поднять отделение для ног;
- 41) «Спинка вниз» - опустить спинку кресла;
- 42) «Спинка вверх» - поднять спинку кресла;
- 43) «Положение лежа» - придать креслу положение лёжа;
- 44) «Положение сидя» - придать креслу положение сидя;
- 45) «Вкл./Выкл.» - включить/выключить массажное кресло.

## ВИДЫ МАССАЖА

### Массаж шиатцу.

Восстанавливает энергетический баланс в организме человека.

### Массаж разминание.

Усиливает кровообращение, снимает напряжение в мышцах, нормализует обмен веществ.

### Массаж похлопывание.

Расслабляет мышцы и уменьшает их отёчность. Оказывает на мышцы тонизирующий эффект, восстанавливает их работоспособность.

### Массаж поколачивание.

Стабилизирует питательные и обменные процессы в области массируемого участка, повышает мышечный тонус.

### Комбинированный массаж (разминание и похлопывание одновременно).

Улучшает общее состояние организма, снимает нагрузку с мышц, помогает активизировать защитные силы всего организма.

### Роликовый массаж.

Роликовый массаж осуществляется движением роликов вверх/вниз, за счёт чего осуществляется функция вытяжки позвоночника. Позволяет снять нагрузку с позвоночника, разминая и растягивая его.

### Вибромассаж.

Оказывает положительное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую систему.

### Воздушно-компрессионный массаж.

Специальные воздушные камеры для массажа в области сиденья, бёдер, икр и стоп создают разминающий эффект нижней части тела, снимают с них мышечную усталость после физической загрузки и постоянное ощущение тяжести.





### Массаж рук.




Расслабляет и стимулирует кровообращение в руках.

### Акупунктурный массаж стоп.

Осуществляет эффективный и глубокий массаж ступней ног. Регулярное воздействие снимает боль, усталость, улучшает сон, снижает давление.

## ВЫБОР ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

- «Спинка вниз»  – опустить спинку кресла
- «Спинка вверх»  – поднять спинку кресла
- «Положение лежа»  – придать креслу положение лёжа
- «Положение сидя»  – придать положение сидя
- \* чтобы отрегулировать положение кресла нажмите и удерживайте кнопку. Отпустите кнопку чтобы зафиксировать положение.

19) «Вкл./Выкл.»  – включить/выключить массажное кресло. При включении кресла автоматически запускается процесс сканирования, после его окончания отрегулируйте расположение роликов по уровню шеи и плеч, затем выберите автоматический или ручной режим массажа. Выключить кресло: нажмите кнопку , чтобы отключить массажные функции, кресло автоматически вернется в исходное положение; после окончания сеанса массажа кресло выключается автоматически, нажмите кнопку , чтобы вернуть кресло в исходное положение.

- \* не рекомендуется вставать с кресла, до момента остановки массажа;
- \* не рекомендуется вставать с кресла во время регулировки/возврата в исходное положение отделения для ног.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Способы загрузки музыки в MP3 плеер.
  - 1) Выключите кресло и откройте коробку MP3 плеера, расположенную позади кресла.
  - 2) Аккуратно надавите на SD карту так, чтобы она показалась из плеера. Теперь вы с легкостью можете ее вынуть.
  - 3) Вставьте SD карту в записывающее устройство для SD карты.
  - 4) Вставьте записывающее устройство в USB порт вашего компьютера (windows XP, windows 2000, windows NT). (В этом случае SD карта выступает в качестве CD-носителя).
  - 5) Загрузите вашу любимую песню в формате MP3 на SD карту (CD-носитель).
  - 6) Аккуратно выньте USB устройство для чтения/записи дисков (CD-носитель) из вашего компьютера.
  - 7) Выньте записывающее устройство SD карты из USB порта вашего компьютера.
  - 8) Выньте SD карту и записывающего устройства.
  - 9) Вставьте SD карту в SD порт MP3 плеера и убедитесь, что карта вставлена надежно.
  - 10) Обновление MP3 списка закончено, вы снова можете включить кресло.
  - 11) Если плеер не читает ваш MP3, отформатируйте SD карту на компьютере, снова загрузите музыку в формате MP3, затем вставьте карту в кресло так, как это описано выше и убедитесь, что карта вставлена надежно.
- ВНИМАНИЕ: НЕ ВЫНИМАЙТЕ И НЕ РАЗБИРАЙТЕ MP3 ПЛЕЕР. ВЫ МОЖЕТЕ ВЫНУТЬ ТОЛЬКО SD КАРТУ.**






## ВЫБОР ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

- 1) «Синхронизация»  - выполнение массажа в такт музыке. Необходимо включить кресло, переждать пока завершится процесс сканирования, затем нажать данную кнопку;
- 2)  - установка времени: время устанавливается только во время ручной установки массажа и имеет три варианта: 15, 20 и 30 минут (функция доступна в ручном режиме массажа);
- 3)  - перемещение массажного механизма «вниз» (кнопка доступна в ручном режиме массажа). Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отрегулировать положение. Отпустите кнопку чтобы зафиксировать положение.
- 4)  - перемещение массажного механизма «вверх» (кнопка доступна в ручном режиме массажа). Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отрегулировать положение. Отпустите кнопку чтобы зафиксировать положение.
- 5)  – Ширина – регулировка роликового механизма по ширине (3 варианта: широкое, среднее, узкое). Данная функция доступна только в ручном режиме (массаж поколачивание, похлопывание, шиацу);
- 6)  – регулировка интенсивности массажа спины (5 уровней). Данная функция доступна только в ручном режиме;
- 7)  – включение/выключение вибромассажа спины (3 уровня: умеренный, сильный, без виброэффекта);
- 8)  - включение/выключение вибромассажа сиденья (3 уровня: умеренный, сильный, без виброэффекта);
- 9)  - включение/выключение массажа рук (3 уровня: слабый, средний, сильный);
- 10)  - выбор вида воздушного массажа нижней части тела (3 уровня: массаж ягодиц, ступней и икр, комбинированный массаж);
- 11)  – интенсивность воздушного массажа нижней части тела (сильный уровень воздействия);
- 12)  – интенсивность воздушного массажа нижней части тела (умеренный уровень воздействия);
- 13) «Подсветка дисплея»  – выбор фоновой подсветки дисплея (8 вариантов)
- 14) «Настройка цвета»  – выбор фона дисплея (2 варианта)
- 15)  – изменение фиксатора положения роликового механизма по уровню шеи и плеч «вниз». Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отрегулировать положение. Отпустите кнопку чтобы зафиксировать положение.
- 16)  - изменение фиксатора положения роликового механизма по уровню шеи и плеч «вверх». Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отрегулировать положение. Отпустите кнопку чтобы зафиксировать положение.
- 17) «Будильник»  – кнопка автоматического включения массажного кресла. Установите показатель времени от 1 до 8 часов для включения кресла.
- 18) Регулировка положения кресла:
  - «Ноги вниз»  – поднять отделения для ног
  - «Ноги вверх»  – опустить отделение для ног

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Перед началом массажа необходимо отрегулировать спинку кресла и отделение для ног в наиболее удобное положение.

Нажмите на кнопку , чтобы запустить процесс сканирования контуров позвоночника. По окончании процесса сканирования прозвучит специальный сигнал, в процессе звучания этого сигнала необходимо отрегулировать положение роликов в области шеи и плеч при помощи кнопок «Регулировка роликов в воротниковой зоне»  , так, чтобы ролики не касались затылочной части головы. Затем необходимо:

1. Нажмите кнопку , выберите один из шести режимов автоматического режима общего массажа (на дисплее отобразится F0, F1, F2, F3, F4, F5):

- F0 - “автоматический массаж всей спины”;
- F1 - “частично автоматический массаж” - массаж определенной области спины. Переместите массажный механизм “вверх”, “вниз” нажав кнопки   соответственно, установив массажный механизм в нужной области спины;
- F2 - “фиксированный автоматический массаж” - массаж заданной точки спины, для перемещения массажного механизма “вверх”, “вниз” нажмите кнопки   соответственно, установив массажный механизм в нужной точке.
- F3 - “автоматический массаж шейного отдела и плеч”;
- F4 - “массаж всей спины”;
- F5 - “автоматический массаж поясничного отдела”.

Установочное время автопрограмм – 15 минут. Дополнительно к автоматическому массажу спины можно включать массаж нижней части тела, массаж рук, вибромассаж, нефритовый проектор и музыкальное сопровождение.




2. Выберите одну из пяти профессиональных автопрограмм: “Релакс”, “Активный”, “Легкий”, “Забота о теле”, “Комфорт”. При включении программы, автоматически включается массаж нижней части тела и музыкальное сопровождение. Дополнительно можно включать массаж рук, вибромассаж, нефритовый проектор.



Во время массажа на дисплее будут отображаться выполняемые функции, оставшееся время и локальные точки на которые будет осуществляться массаж.

По окончании сеанса массажный механизм автоматически возвращается в исходную точку. Затем необходимо вернуть спинку кресла и отделение для ног в исходное положение.













Перед началом массажа необходимо отрегулировать спинку кресла и отделение для ног в наиболее удобное положение.

Нажмите на кнопку , чтобы запустить процесс сканирования контуров позвоночника. По окончании процесса сканирования прозвучит специальный сигнал, в процессе звучания этого сигнала необходимо отрегулировать положение роликов в области шеи и плеч при помощи кнопок «Регулировка роликов в воротниковой зоне»  , так, чтобы ролики не касались затылочной части головы.

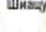Нажмите на кнопку  чтобы включить ручной режим управления массажными функциями. Выберите один из шести режимов ручной настройки (чтобы переключить режим нажмите кнопку ):

- «Фиксированный массаж» (на дисплее отобразится P0) – массаж заданной точки спины, для перемещения массажного механизма «вниз», «вверх» нажмите кнопки   соответственно. Установив массажный механизм в нужной точке, выберите один из пяти видов массажа:     . Выберите интенсивность массажа нажав кнопку  (5 уровней). Настройте функцию «Ширина» нажав кнопку  (3 уровня), данная функция доступна при выполнении массажа   .  \* не рекомендуется выполнять массаж одной точки спины более 5 минут.





- «Частичный массаж» (на дисплее отобразится P1) – массаж определенной области спины. Переместите массажный механизм «вниз», «вверх» нажав кнопки   соответственно. Установив массажный механизм в нужной области, выберите один из пяти видов массажа:     . Выберите интенсивность массажа нажав кнопку  (5 уровней). Настройте функцию «Ширина» нажав кнопку  (3 уровня), данная функция доступна при выполнении массажа   . 



- «Общий массаж спины» (на дисплее отобразится P2) – массаж выполняется по всей области спины. При включении режима автоматически активируется функция «роликового массажа» - прокатывание роликов вдоль позвоночника. Настройте функцию «Ширина» нажав кнопку  (3 уровня).


- \* при выполнении данного режима необходимо настроить кресло в положение «Лёжа».

- «Массаж в области плеч» (на дисплее отобразится P3). Выберите один из пяти видов массажа:     . Выберите интенсивность массажа нажав кнопку  (5 уровней). Настройте функцию «Ширина» нажав кнопку  (3 уровня), данная функция доступна при выполнении массажа   .

- «Массаж всей спины» (на дисплее отобразится P4). Выберите один из пяти видов массажа:     . Выберите интенсивность массажа нажав кнопку  (5 уровней). Настройте функцию «Ширина» нажав кнопку  (3 уровня), данная функция доступна при выполнении массажа   .

- «Массаж поясничного отдела» (на дисплее отобразится P5). Выберите один из пяти видов массажа:     . Выберите интенсивность массажа нажав кнопку  (5 уровней). Настройте функцию «Ширина» нажав кнопку  (3 уровня), данная функция доступна при выполнении массажа   .

-  (функция вытяжки позвоночника - приведите кресло в лежачее положение, затем активируйте данную функцию). Настройте функцию «Ширина» нажав кнопку  (3 уровня).

- Выбрав один из видов ручного режима массажа, дополнительно можно выбрать: музыкальное сопровождение; установить время массажа, нажмите кнопку  (15, 20 и 30 минут); массаж рук, вибромассаж; воздушный массаж нижней части тела; нефритовая термотерапия.

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

---

Прежде всего, благодарим вас за покупку массажного кресла. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом использования кресла и четко следуйте ее указаниям. Обратите особое внимание на меры предосторожности и сохраните данную инструкцию для будущего использования.

## СОДЕРЖАНИЕ

---

Меры предосторожности	02
Наименование компонентов	04
Функции и предназначение	05
Инструкция по эксплуатации	06
Спецификация продукта	16



## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не позволяйте детям прикасаться к подвижным частям данного прибора.
- Всегда отключайте прибор от сети после использования и перед чисткой, чтобы избежать его повреждения.
- При использовании кресла, следуйте данной инструкции.
- Используйте с креслом только рекомендованные приспособления.
- Не используйте кресло вне помещений.
- Используйте кресло только по назначению так, как указано в инструкции.
- Никогда не пользуйтесь прибором, если у него поврежден шнур или штепсель, если он работает неправильно, если он был поврежден, если его уронили или если он побывал в воде.
- Не используйте прибор, если вас клонит в сон, а также находясь в нетрезвом состоянии.
- Не рекомендуется использовать кресло менее чем через час после приема пищи.
- Не используйте прибор в случае повреждения покрытия (обнажился встроенный механизм).
- Используйте кресло только при правильном заземлении.
- Не используйте кресло в тесном, плохо проветриваемом помещении, в помещении с высокой температурой или с повышенной влажностью.

### НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРЕСЛОМ.

- Лицам, страдающим от сердечной недостаточности, а также носящим на себе электронные медицинские приборы.
- Лицам с высокой температурой.
- Лицам с диагнозом остеопороз.
- Беременным женщинам и женщинам в период менструации
- Лицам, проходящим лечение или испытывающим недомогание следует перед использованием проконсультироваться у врача.
- Если недомогание или боль возникли во время использования кресла, необходимо немедленно остановить массаж и проконсультироваться у врача.

Уважаемый покупатель!

Компания "TRG" благодарит Вас за лучший выбор. Производитель массажных кресел китайская компания "iRest" имеет Сертификат Соответствия, все кресла "iRest" одобрены для использования Министерством здравоохранения Китая.

Компания "TRG" гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.


Срок гарантии \_\_\_\_\_ со дня покупки. Данным Гарантийным Сертификатом компания "TRG" берет на себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине завода-производителя, при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации.

В случае, если Ваше кресло по каким-либо причинам Вам не подходит Вы можете его вернуть или обменять в 14-дневный срок при условии сохранения рабочего состояния, товарного вида, упаковки и документов!

#### Условия гарантии:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
  - \* правильное и четкое заполнение Гарантийного Сертификата;
  - \* наличие чека (приходного кассового ордера), содержащего дату покупки.
2. Компания «TRG» оставляет за собой право в отказе от гарантийного обслуживания в случае непредставления вышеуказанных документов или информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой, что вызовет сомнения или затруднения в установлении факта и даты приобретения изделия.
3. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
4. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание.
5. Компания «TRG» не отвечает за недостатки Товара в следующих случаях:
  - а) Исполнения Товара, предназначенного для личных (бытовых, семейных) нужд, для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих назначению Товара;
  - б) Нарушения правил и условий эксплуатации, установки Товара, указанных в инструкции по эксплуатации;
  - в) Если на Товаре повреждены пломбы, имеются следы вскрытия, нарушения целостности Товара или следы попыток ремонта Товара при отсутствии подтверждения предварительного извещения Потребителя об обнаружении недостатков качества Товара;
  - г) Если недостатки качества вызваны внесенными в конструкцию или схему товара изменениями, которые не предусмотрены изготовителем;
  - д) Если недостаток Товара стал следствием действия непреодолимой силы, несчастного случая, умышленных или неосторожных действий (бездействия) Потребителя или третьих лиц;
  - е) Возникновения недостатков вследствие воздействия на Товар, а равно проникновения внутрь вещества, материалов, жидкостей, насекомых;
  - ж) Подключения Товара к сети или источнику электрического питания, параметры электрической энергии которых не соответствуют действующим в Российской Федерации техническим регламентам, а равно в случае возникновения недостатков по причине временного отклонения параметров электрической энергии от требований вышеуказанных регламентов (перепад напряжения и т.п.)
6. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных Вам действующим законодательством Российской Федерации.
7. В случае наличия исправления, гарантийный талон считается не действительным.





# Гарантийный Сертификат

Наименование изделия: .....

Страна происхождения: КИТАЙ

Серийный номер: .....

Дата покупки:    в    в    20    г.

Подпись продавца: .....

**ГАРАНТИЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ**  
Обращайтесь к официальному представителю  
компании «ТРГ» в вашем регионе.

**СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ**  
Ф, И, О. : .....

Адрес: .....

ТЕЛЕФОН: .....

Подтверждаю получение исправного изделия в рабочем состоянии.  
Претензий по внешнему виду изделия не имею, с условиями гарантии  
ознакомлен.

Подпись покупателя: .....

Место продажи: .....

Место для печати: .....

www.trg.ru

- Тем, у кого имеется искривление позвоночника.
- Людям с кожными заболеваниями.
- Детям до 12 лет, не умеющим правильно обращаться с прибором.
- Для массажа головы, колен или в области живота.
- Укрываясь одеялом или подушкой. Повышенная температура может стать причиной пожара, электрического шока или травмы.

#### БЕЗОПАСНОСТЬ.


- Используйте только подходящую к штепселю розетку.
- Не пытайтесь включить/выключить кресло из сети влажными руками. Вы можете получить травму или электрический шок.
- Не используйте влажную тряпку при чистке электронных частей прибора.
- Оберегайте прибор от воздействия высокой температуры, огня или прямых солнечных лучей.
- Не забывайте отключать кресло от питания каждый раз после использования.
- Чистите кресло только сухой тряпкой, не используйте растворы, содержащие ацетон, бензин или спирт.
- Не толкайте и не передвигайте кресло на колесиках по неподходящей поверхности. Приподнимите и перенесите его.
- Следите за тем, чтобы индивидуальный сеанс работы кресла не длился слишком долгое время.
- Старайтесь не повредить шнур, не тяните его с силой, не скручивайте, не складывайте. Повреждение шнура может вызвать электрический шок.
- Если массажное кресло вышло из строя, немедленно отключите его и обратитесь в сервисный центр.
- При отключении электроэнергии нажмите кнопку «off», затем выньте штепсель из розетки. В противном случае при включении электроэнергии может возникнуть опасность.
- Никогда ничего не засовывайте в отверстия.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- При работе двигающиеся механизмы кресла издают специфичные звуки.
- Если панель управления выключена, проверьте - включен ли прибор в сеть.
- Если установленное время массажа вышло, сработает система автоматического выключения работы прибора.
- При слишком длительном использовании кресла датчик температуры автоматически выключит работу прибора. Вы сможете снова использовать кресло после получасового перерыва.



## НАИМЕНОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

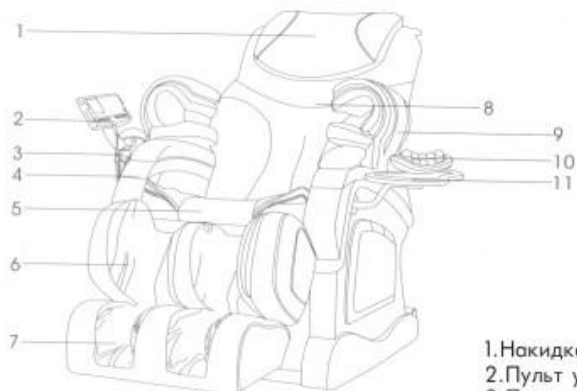

- 1.Накидка
- 2.Пульт управления
- 3.Подлокотник
- 4.Подушка
- 5.Сидение
- 6.Отделение для икр
- 7.Отделение для стоп
- 8.Jade heater
- 9.Мини-столик
- 10.Задняя панель
- 11.Вентиляция
- 12.Подставка под пульт управления
- 13.Подставка под мини-столик
- 14.Провод наушников
- 15.Наушники
- 16.MP3 плеер
- 17.Holding heat power plug
- 18.Задние колесики
- 19.Шнур и штепсельная вилка
- 20.Разъем для наушников
- 21.Разъем для штепсельной вилки
- 22.Разъем для соединения
- 23.Разъем для предохранителя



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: SL-A12Q

Наименование: Массажное кресло

Входное напряжение: AC 110-120V  
AC220-240V

60Hz   
50Hz

Мощность: 220W