



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО SL-A29

Прежде всего, благодарим вас за покупку массажного кресла. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом использования кресла и четко следуйте ее указаниям. Обратите особое внимание на меры предосторожности и сохраните данную инструкцию для будущего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	02
Функции и предназначение.....	04
Наименование компонентов.....	06
Инструкция по эксплуатации.....	07
Пульт управления.....	20
Регулировки	21

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не позволяйте детям прикасаться к подвижным частям данного прибора.

Всегда отключайте прибор от сети после использования и перед чисткой, чтобы избежать его повреждения.

При использовании кресла, следуйте данной инструкции.

Используйте с креслом только рекомендованные приспособления.

Не используйте кресло вне помещений.

Используйте кресло только по назначению так, как указано в инструкции.

Никогда не пользуйтесь прибором, если у него поврежден шнур или штепсель, если он работает неправильно, если он был поврежден, если его уронили или если он побывал в воде.

Не используйте прибор, если вас клонит в сон, а также находясь в нетрезвом состоянии.

Не рекомендуется использовать кресло менее чем через час после приема пищи.

Не используйте прибор в случае повреждения покрытия (обнажился встроенный механизм).

Используйте кресло только при правильном заземлении.

Не используйте кресло в тесном, плохо проветриваемом помещении, в помещении с высокой температурой или с повышенной влажностью.

Не рекомендуется пользоваться креслом.

- Лицам, страдающим от сердечной недостаточности, а также носящим на себе электронные медицинские приборы.
- Лицам с высокой температурой.
- Лицам с диагнозом остеопороз.
- Беременным женщинам и женщинам в период менструации
- Лицам, проходящим лечение или испытывающим недомогание следует перед использованием проконсультироваться у врача.
- Если недомогание или боль возникли во время использования кресла, необходимо немедленно остановить массаж и проконсультироваться у врача.
- Тем, у кого имеется искривление позвоночника.
- Людям с кожными заболеваниями.
- Детям до 12 лет, не умеющим правильно обращаться с прибором.
- Для массажа головы, колен или в области живота.
- Укрываясь одеялом или подушкой. Повышенная температура может причиной пожара, электрического шока или травмы.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасность.

- Используйте только подходящую к штепселю розетку.
- Не пытайтесь включить\выключить кресло из сети влажными руками. Вы можете получить травму или электрический шок.
- Не используйте влажную тряпку при чистке электронных частей прибора.
- Оберегайте прибор от воздействия высокой температуры, огня или прямых солнечных лучей.
- Не забывайте отключать кресло от питания каждый раз после использования.
- Чистите кресло только сухой тряпкой, не используйте растворы, содержащие ацетон, бензин или спирт.
- Не толкайте и не передвигайте кресло на колесиках по неподходящей поверхности. Приподнимите и перенесите его.
- Следите за тем, чтобы индивидуальный сеанс работы кресла не длился слишком долгое время.
- Старайтесь не повредить шнур, не тяните его с силой, не скручивайте, не складывайте. Повреждение шнура может вызвать электрический шок.
- Если массажное кресло вышло из строя, немедленно отключите его и обратитесь в сервисный центр.
- При отключении электроэнергии нажмите кнопку «off», затем выньте штепсель из розетки. В противном случае при включении электроэнергии может возникнуть опасность.
- Никогда ничего не засовывайте в отверстия.

Примечания

- При работедвигающиеся механизмы кресла издают специфичные звуки.
- Если панель управления выключена, проверьте - включен ли прибор в сеть.
- Если установленное время массажа вышло, сработает система автоматического выключения работы прибора.
- При слишком длительном использовании кресла датчик температуры автоматически выключит работу прибора. Вы сможете снова использовать кресло после получасового перерыва.

НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ



1. Подушка 2. Пульт управления 3. Подлокотники 4. Накидка 5. Отделение для ног 6. Отделение для стоп 7. Накидка спинки 8. Мини-столик 9. Кожух кресла 10. Вентиляция 11. Кармашек под пульт управления 12. Подставка дисплея 13. Разъем для пульта 14. Разъемы для отделения для рук и термотерапии спины 15. Колесики 16. Шнур и вилка 17. Предохранитель 18. Сетевой выключатель 19. Сетевая розетка

ФУНКЦИИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Функции

Кресло снабжено функцией трехмерного сканирования индивидуальных особенностей вашего тела, что позволяет ему автоматически приспособиться к форме вашего тела.

- Кресло оснащено удобным пультом управления с цветным сенсорным экраном, который дает вам возможность следить и корректировать массажный процесс, слушать музыку, смотреть фильмы и фотографии, также для управления предусмотрен беспроводной пульт.
- Массаж осуществляется с помощью бесшумного четырехроликового механизма, который способен осуществлять 5 различных методов массажа, а именно: растирание, похлопывание, постукивание, точечный массаж (нажатие пальцев), а также синхронное растирание и похлопывание.
- 5 запрограммированных видов массажа в автоматическом режиме: успокаивающий, расслабляющий, массаж устраняющий и смягчающий боль, массаж верхней части тела, шеи и плеч, спины и поясницы. Возможность корректировки скорости и широты воздействия массажа.
- В ручном режиме кресло осуществляет массаж одной из 5ти зон: точечный массаж фиксированной зоны, массаж спины, верхней или нижней части тела, а также массаж заданной области. Возможность корректировки широты воздействия массажа — от узкой, средней до широкой зоны. Интенсивность вибромассажа и массажа роликовым механизмом меняется в соответствии с интенсивностью музыкального сопровождения и включает в себя 5 различных степеней интенсивности.
- Кресло осуществляет воздушный массаж нижней части тела, стоп, рук, ягодиц и голеней.
- Термотерапия спины и прогревание стоп.
- Вибромассаж ягодиц предполагает 2 степени интенсивности.
- Возможность менять положение отделения для ног и спинки кресла.
- Автоматическая подстройка кресла под индивидуальные особенности каждого пользователя, сканирование спины и запоминание положения плеч.

Предназначение

устраняет усталость
облегчает боль в мышцах
снимает напряжение в мышцах
снимает нервную и мышечную боль

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Вкл/Выкл	Нажмите на кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить или выключить массаж. Продолжительное нажатие на кнопку включает или выключает кресло и пульт управления.
▲	Нажмите на кнопку "вверх", чтобы прибавить громкость
▼	Нажмите на кнопку "вниз", чтобы прибавить громкость
Музыка	См. страницу 15
Фото	См. страницу 15
Фото и музыка	См. страницу 15
Видео	См. страницу 15
Часы и календарь	См. страницу 15
Настройки	См. страницу 15

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

I. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КРЕСЛА

Убедитесь, что массажное кресло выключено, вставьте сетевой шнур одним концом в разъем кресла, другим - в розетку. Включите кресло.




II. НАЧАЛО МАССАЖА

Чтобы начать массаж, нажмите на кнопку вкл/выкл на дисплее или на пульте. Вы попадете в меню роликового сканирования. Во время сканирования массажных точек, все другие кнопки массажа, кроме кнопки АВТО, не функционируют.

Картинка дисплея после нажатия на кнопку вкл.


Картинка дисплея после начала массажа

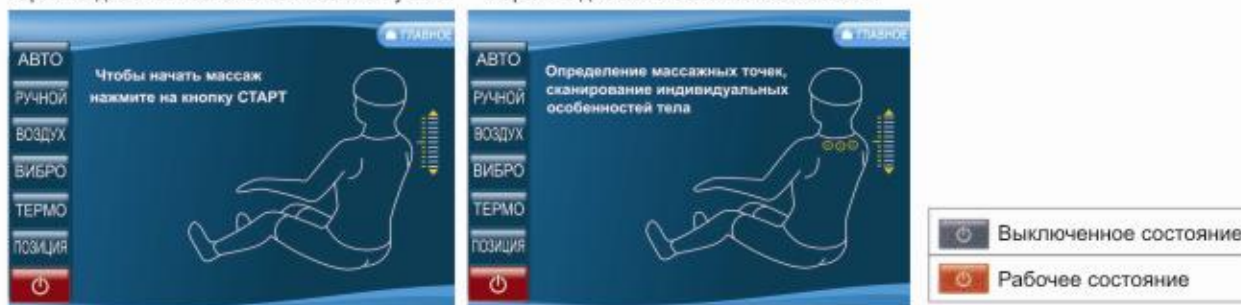

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. УСТАНОВКА ПОЗИЦИИ ПЛЕЧ

После завершения процесса сканирования, вам предложат установить позицию роликов на уровне Ваших плеч. Существуют 5 положений позиции ролика, вы можете откорректировать ее кнопками вверх/вниз. Если не позиция Вас устраивает и вы не нажимаете кнопки, через 10 секунд позиция закрепится автоматически и включится авто-программа массажа.



Пожалуйста, отрегулируйте положение роликов на уровне Ваших плеч

Слишком высоко
Оптимально
Слишком низко

Позиция плеч


▲	Поднять позицию ролика выше
▼	Опустить позицию ролика ниже

1	2	3	4	5

3. РЕЖИМ ПАУЗЫ

Информация на дисплее о состоянии процесса массажа

Режим паузы



Снятие боли 8:08 мин

СКОРОСТЬ ШИРОТА
ИНТЕНСИВНОСТЬ

ПАУЗА



12 Min

EASE ACBE SPEED
UPPER BACK WIDTH
LOWER BODY STRENGTH ARM
STRENGTH
WAST SOLE


ПАУЗА

ПАУЗА	Нажмите на кнопку пауза, чтобы приостановить массаж, кресло автоматически включится через 15 минут.
СТАРТ	Нажмите на кнопку старт, чтобы возобновить массаж.


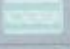

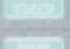

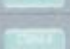
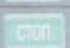



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. АВТО-ПРОГРАММЫ МАССАЖА

Нажмите на кнопку АВТО, чтобы войти в раздел авто-программ массажа. Выберите желаемую авто-программу массажа. Авто-режим не предусматривает изменение скорости и ширины массажа.



The screenshot shows a control panel for a massage device. On the left, there is a vertical menu with options: АВТО (highlighted in red), РУЧНОЙ, ВОЗДУХ, ВИБРО, ТЕРМО, ПОЗИЦИЯ, and a power button. The main area is titled 'Авто-программы массажа' and contains several buttons: УСПОКОИВОЩАЯ, РАСТРАБОТКА, ОНЯТИЕ БОЛИ, УСТРАНЕНИЕ УСТАЛОСТИ, ВЕРНУТЬ ЧАСТЬ ТЕЛА, ШЕЯ И ПЛЕЧИ, СПИНА И ПОЯСНИЦА, and СТОП. There are also 'НАЗАД' and 'ГЛАВНОЕ' buttons at the bottom right of the panel.

	Успокаивает тело
	Улучшает циркуляцию крови
	Воздействует на массажные точки и снимает боль
	Снимает физическую усталость и придает сил
	Общий массаж шеи, плеч, спины и поясницы
	Сфокусированный массаж шеи и плеч
	Сфокусированный массаж спины и поясницы
	Отключает автоматический режим
	Возврат в общее меню
	Переход в главное меню

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5. УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ МАССАЖА

Нажмите на кнопку РУЧНОЙ РЕЖИМ и войдите в меню ручной настройки массажа. В данном меню Вам доступны функции выбора метода массажа, растяжки спины, настройки скорости и широты массажа. Широту массажа можно менять в режимах похлопывания, постукивания и точечном массаже. Настройка скорости массажа доступна в любом из режимов.



6. МЕТОДЫ МАССАЖА РУЧНОГО РЕЖИМА



РАММНАЖЕ	Возможна настройка скорости	ПОДЛОЖИВАНЕ	Возможна настройка скорости и широты массажа
РАММНАЖЕ И ПОДЛОЖИВАНЕ	Возможна настройка скорости	ШАЦЛУ	Возможна настройка скорости и широты массажа
ПОСТУКИВАНЕ	Возможна настройка скорости и широты массажа	СТОП	Остановка массажа и возможность настройки его широты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7. РАСТЯЖКИ СПИНЫ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ



	Двусторонний общий массаж спины
	Двусторонний массаж верхней части спины
	Двусторонний массаж нижней части спины
	Двусторонний частичный массаж выбранной области
	Точечный массаж заданной области

8. СИНХРОНИЗАЦИЯ МУЗЫКИ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

При подключении данной функции, вы автоматически попадете в музыкальное меню настроек и выйдете из ручного или авто-режима. Скорость музыки будет меняться в соответствии с изменениями скорости и интенсивности массажа.



	ВКЛ. МУЗЫКУ
	ВЫКЛ. МУЗЫКУ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9. ВОЗДУШНЫЙ МАССАЖ

Нажмите на кнопку ВОЗДУХ, чтобы войти в меню функций воздушного массажа.

Предусмотрены три режима воздушного массажа нижней части тела, которые активируются нажатием одной из соответствующих кнопок. Если вы активируете сразу воздушный массаж нижней части тела и ног, то растяжка голени включится автоматически. Вы можете выключить ее нажатием на соответствующую кнопку. Функция растяжки голени недоступна при активировании функции воздушного массажа ягодиц.




	Воздушный массаж нижней части тела
	Воздушный массаж ягодиц
	Воздушный массаж ног
	Отключает воздушный массаж всей нижней части тела
	Кнопка включения/выключения растяжки голени
	Кнопка включения/выключения воздушного массажа рук
	Интенсивность: предусмотрены два уровня интенсивности воздушного массажа нижней части тела. НИЗКАЯ ВЫСОКАЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


10. ВИБРО-МАССАЖ

Нажмите на кнопку ВИБРО, чтобы зайти в меню настройки функций вибромассажа.

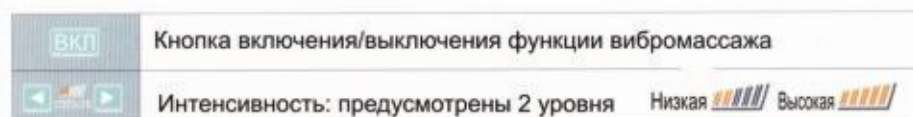

11. ТЕРМОТЕРАПИЯ

Нажмите на кнопку ТЕРМО, чтобы зайти в меню настройки функций термотерапии поясницы и стоп. Вы можете включить или выключить данную функцию нажатием соответствующей кнопки.

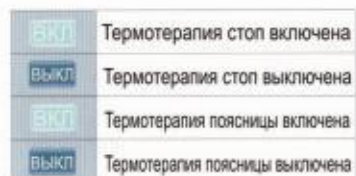

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

12. НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ КРЕСЛА

Нажмите на кнопку ПОЗИЦИЯ и выберите желаемую позицию кресла нажатием одной из соответствующих кнопок.



ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ НОГ		Нажмите на кнопку, чтобы плавно опустить отделение для ног. Повторное нажатие закрепит позицию.
		Нажмите на кнопку, чтобы плавно поднять отделение для ног. Повторное нажатие закрепит позицию.
СПИНКА КРЕСЛА		Нажмите на кнопку, чтобы плавно опустить спинку кресла. Повторное нажатие закрепит позицию.
		Нажмите на кнопку, чтобы плавно поднять спинку кресла. Повторное нажатие закрепит позицию.
СИНХРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА		Нажмите на кнопку, чтобы придать креслу положение лежа. Повторное нажатие на кнопку остановит его.
		Нажмите на кнопку, чтобы привести кресло в исходное положение. Повторное нажатие остановит его.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

13. ФУНКЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МАССАЖА

Нажмите на кнопку ПОЗИЦИЯ и выберите желаемую позицию кресла нажатием одной из соответствующих кнопок.



Предусмотрено 5 уровней синхронизации музыки и массажа				
1	2	3	4	5

	Воспроизв./стоп		Назад		Прибавить громкость
	Предыдущая		Вперед		Убавить громкость
	Следующая		Режим повтора		

Интенсивность музыкального сопровождения меняется с помощью кнопок ▲ и ▼.
Символ ● показывает выбранное состояние.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

14. СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

Позволяет Вам выбрать язык, дату, яркость дисплея и прочее



ГОЛОСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ		ЯЗЫК МЕНЮ	
	Включить голосовое сопровождение		Китайский язык
	Выключить голосовое сопровождение		Английский язык

	ДАТА И ВРЕМЯ		КНОПКИ ВОЗВРАТА И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ



Настройка контрастности и яркости дисплея




В целях безопасности дисплея советуем легко нажимать в центр точек настройки тонким, тупым предметом, например, сенсорным карандашом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

15. ФОТО

Вставьте USB-карту в разъем, нажмите на кнопку фото и вы войдете в режим фото-меню. Выберите нужную фотографию для сопровождения массажа.

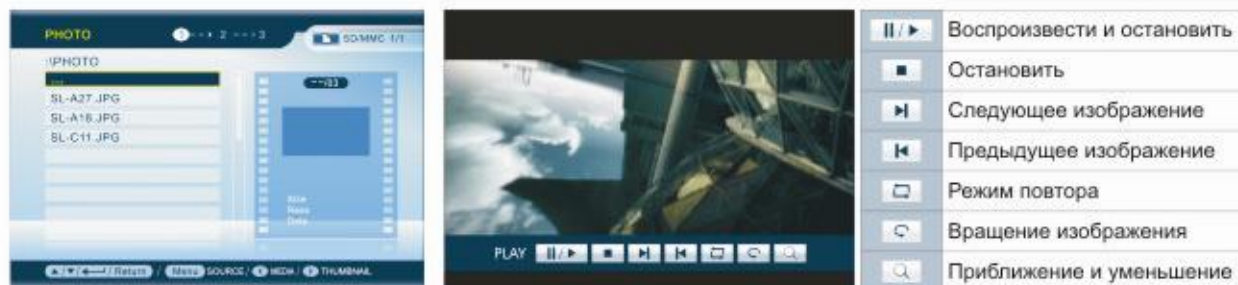

16. ФОТО И МУЗЫКА

Вставьте USB-карту в разъем, нажмите на кнопку фото и музыка и вы войдете в режим фото и музыки. Выберите нужную музыку и картинку для сопровождения массажа.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

17. ВИДЕО, КАЛЕНДАРЬ И ЧАСЫ

Вставьте USB-карту в разъем. Выберите меню ВИДЕО и установите нужный фильм. В разделе ЧАСЫ и КАЛЕНДАРЬ вы можете установить нужную дату в время.



	Воспроизв./Пауза		СТОП
	Следующий		Предыдущий
	Вперед		Назад
	Режим повтора		

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

18. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



	Включить/выключить массаж		Предыдущий
	Включить/выключить пульт управления		Следующий
	АВТО-режим массажа		Воспроизвести/Пауза
	Ручной режим массажа		СТОП
	Воздушный массаж		Прибавить звук
	Вибромассаж		Убавить звук
	ТЕРМОТЕРАПИЯ		НАЗАД
	НАЗАД		ВПЕРЕД

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


	Кнопка вверх		Опустить отделение для ног
	Кнопка Вниз		Поднять спинку кресла
	Влево		Опустить спинку кресла
	Вправо		Придать креслу исходное положение
	Кнопка подтверждения		Привести кресло в положение ЛЕЖА
 RETURN	Возврат		Возврат в главное меню
	Кнопка паузы		Возврат в предыдущее меню
	Поднять отделение для ног		

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

III.

Положение юпки в выключенном состоянии.

Способ безопасного отключения вилки из розетки.

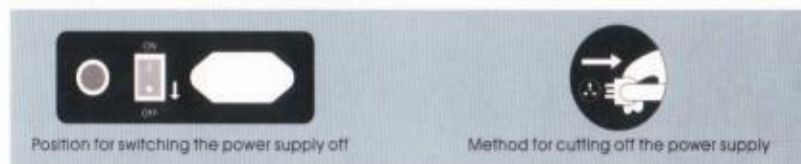

IV. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ И МИНИ-СТОЛИКА.


Установите на кресло пульт управления (1) Пульт управления может свободно наклоняться(2) и вращаться(3).



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


V. РЕГУЛИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ НАКИДКИ И ПОДУШКИ КРЕСЛА

Вы можете использовать или снять накидку, которая может ослабить действие массажа шеи и плеч способом растирания, по вашему усмотрению (рекомендовано использовать накидку). Накидка кресла присоединяется к спинке кресла при помощи молнии(1). Подушка присоединяется к накидке при помощи липучки(2)

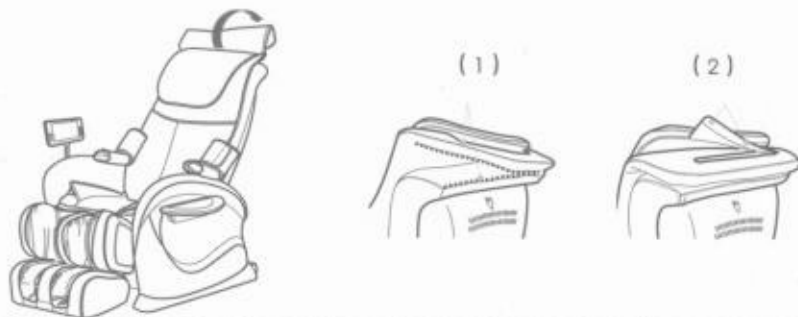

Предупреждение: Не используйте кресло без накидки, так как это может причинить вам вред.

VI.

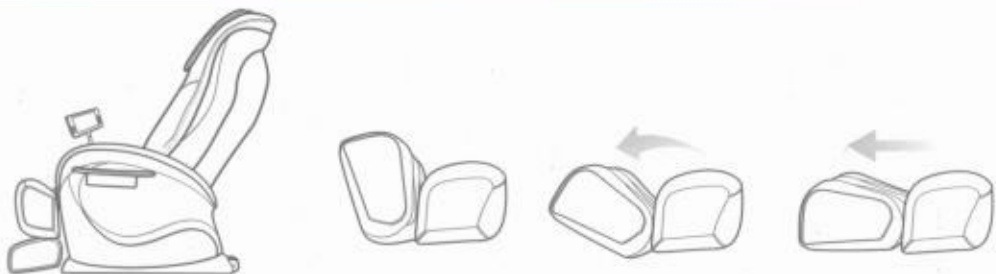


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VII. ЗАЩИТА ПОЛА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА

Длительное использование кресла на деревянном полу может повредить пол. Во избежание этого используйте ковер или другое покрытие.

Предостережение: Не передвигайте кресло с помощью колесиков по деревянному полу, земле или в узком пространстве. Поднимите кресло для перемещения.

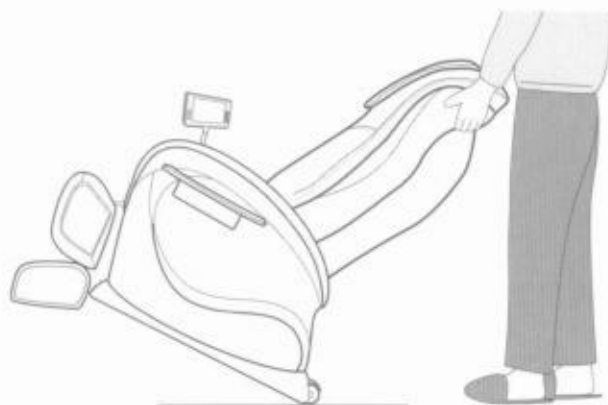

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: SL-A29

Наименование: Массажное кресло

Входное напряжение: AC 110-120V
AC220-240V

60Hz

50Hz

Мощность: 220W