

*i*Rest™

SL-A31 Массажное кресло

*i*Rest™

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ



*i*Rest™

Поставщик товаров торговой марки iRest на территории России
ООО "ТРГ"
тел.: +7 842 354 56 36
e-mail: irest@bk.ru

ИНСТРУКЦИЯ - ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

ТРГ

www.ru-irest.ru e-mail: irest@bk.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Прежде всего, благодарим вас за покупку массажного кресла. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом использования кресла и четко следуйте ее указаниям. Обратите особое внимание на меры предосторожности и сохраните данную инструкцию для будущего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	02
Наименование компонентов	04
Функции и предназначение	05
Инструкция по эксплуатации	06
Спецификация продукта	12

- Не позволяйте детям прикасаться к подвижным частям данного прибора.
- Всегда отключайте прибор от сети после использования и перед чисткой, чтобы избежать его повреждения.
- При использовании кресла, следуйте данной инструкции.
- Используйте с креслом только рекомендованные приспособления.
- Не используйте кресло вне помещений.
- Используйте кресло только по назначению так, как указано в инструкции.
- Никогда не пользуйтесь прибором, если у него поврежден шнур или штепсель, если он работает неправильно, если он был поврежден, если его уронили или если он побывал в воде.
- Не используйте прибор, если вас клонит в сон, а также находясь в нетрезвом состоянии.
- Не рекомендуется использовать кресло менее чем через час после приема пищи.
- Не используйте прибор в случае повреждения покрытия (обнажился встроенный механизм).
- Используйте кресло только при правильном заземлении.
- Не используйте кресло в тесном, плохо проветриваемом помещении, в помещении с высокой температурой или с повышенной влажностью.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРЕСЛОМ.

- Лицам, страдающим от сердечной недостаточности, а также носящим на себе электронные медицинские приборы.
- Лицам с высокой температурой.
- Лицам с диагнозом остеопороз.
- Беременным женщинам и женщинам в период менструации
- Лицам, проходящим лечение или испытывающим недомогание следует перед использованием проконсультироваться у врача.
- Если недомогание или боль возникли во время использования кресла, необходимо немедленно остановить массаж и проконсультироваться у врача.

- Тем, у кого имеется искривление позвоночника.
- Людям с кожными заболеваниями.
- Детям до 12 лет, не умеющим правильно обращаться с прибором.
- Для массажа головы, колен или в области живота.
- Укрываясь одеялом или подушкой. Повышенная температура может стать причиной пожара, электрического шока или травмы.

БЕЗОПАСНОСТЬ.

- Используйте только подходящую к штепселю розетку.
- Не пытайтесь включить/выключить кресло из сети влажными руками. Вы можете получить травму или электрический шок.
- Не используйте влажную тряпку при чистке электронных частей прибора.
- Оберегайте прибор от воздействия высокой температуры, огня или прямых солнечных лучей.
- Не забывайте отключать кресло от питания каждый раз после использования.
- Чистите кресло только сухой тряпкой, не используйте растворы, содержащие ацетон, бензин или спирт.
- Не толкайте и не передвигайте кресло на колесиках по неподходящей поверхности. Приподнимите и перенесите его.
- Следите за тем, чтобы индивидуальный сеанс работы кресла не длился слишком долгое время.
- Старайтесь не повредить шнур, не тяните его с силой, не скручивайте, не складывайте. Повреждение шнура может вызвать электрический шок.
- Если массажное кресло вышло из строя, немедленно отключите его и обратитесь в сервисный центр.
- При отключении электроэнергии нажмите кнопку «off», затем выньте штепсель из розетки. В противном случае при включении электроэнергии может возникнуть опасность.
- Никогда ничего не засовывайте в отверстия.

ПРИМЕЧАНИЯ

- При работедвигающиеся механизмы кресла издают специфичные звуки.
- Если панель управления выключена, проверьте - включен ли прибор в сеть.
- Если установленное время массажа вышло, сработает система автоматического выключения работы прибора.
- При слишком длительном использовании кресла датчик температуры автоматически выключит работу прибора. Вы сможете снова использовать кресло после получасового перерыва.



1. Подголовник
2. Пульт управления
3. Подлокотник
4. Подушка
5. Отделение для икр
6. Отделение для стоп
7. Накидка
8. Задняя панель
9. Вентиляция
10. Подставка под пульт управления
11. Задние колесики
12. Шнур и штепсельная вилка
13. Разъем для предохранителя
14. Разъем для соединения
15. Разъем для штепсельной вилки



Уважаемый покупатель!

Компания "TRG" благодарит Вас за лучший выбор. Производитель массажных кресел китайская компания "iRest" имеет Сертификат Соответствия, все кресла "iRest" одобрены для использования Министерством здравоохранения Китая.

Компания "TRG" гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии _____ со дня покупки. Данным Гарантийным Сертификатом компания "TRG" берет на себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине завода-производителя, при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации.

В случае, если Ваше кресло по каким-либо причинам Вам не подходит Вы можете его вернуть или обменять в 14-дневный срок при условии сохранения рабочего состояния, товарного вида, упаковки и документов!

Условия гарантии:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
 - * правильное и четкое заполнение Гарантийного Сертификата;
 - * наличие чека (приходного кассового ордера), содержащего дату покупки.
2. Компания «TRG» оставляет за собой право в отказе от гарантийного обслуживания в случае непредставления вышеуказанных документов или информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой, что вызовет сомнения или затруднения в установлении факта и даты приобретения изделия.
3. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
4. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание.
5. Компания «TRG» не отвечает за недостатки Товара в следующих случаях:
 - а) Использования Товара, предназначенного для личных (бытовых, семейных) нужд, для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих назначению Товара;
 - б) Нарушения правил и условий эксплуатации, установки Товара, указанных в инструкции по эксплуатации;
 - в) Если на Товаре повреждены пломбы, имеются следы вскрытия, нарушения целостности Товара или следы попыток ремонта Товара при отсутствии подтверждения предварительного извещения Потребителя об обнаружении недостатков качества Товара;
 - г) Если недостатки качества вызваны внесенными в конструкцию или схему товара изменениями, которые не предусмотрены изготовителем;
 - д) Если недостаток Товара стал следствием действия непреодолимой силы, несчастного случая, умышленных или неосторожных действий (бездействия) Потребителя или третьих лиц;
 - е) Возникновения недостатков вследствие воздействия на Товар, а равно проникновения внутрь веществ, материалов, жидкостей, насекомых;
 - ж) Подключения Товара к сети или источнику электрического питания, параметры электрической энергии которых не соответствуют действующим в Российской Федерации техническим регламентам, а равно в случае возникновения недостатков по причине временного отклонения параметров электрической энергии от требований вышеуказанных регламентов (перепад напряжения и т.п.)
6. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных Вам действующим законодательством Российской Федерации.
7. В случае наличия исправления, гарантийный талон считается не действительным.





Гарантийный Сертификат

Наименование изделия:

Страна происхождения: КИТАЙ

Серийный номер:

Дата покупки: 20 .. г.

Подпись продавца:

ГАРАНТИЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Обращайтесь к официальному представителю
компании «ТРГ» в вашем регионе.

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

Ф. И. О.:

Адрес:

ТЕЛЕФОН:

Подтверждаю получение исправного изделия в рабочем состоянии,

Претензий по внешнему виду изделия не имею, с условиями гарантии
ознакомлен.

Подпись покупателя:

Место продажи:

Место для печати:

www.trg.ru

ФУНКЦИИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Массажное кресло осуществляет все виды массажа: механический, воздушный, пульсирующий, акупунктурный и даже тепловое воздействие – прогревание стоп и поясничного отдела.

Все виды массажа спины: шиацу, разминание, похлопывание, поколачивание, комбинированный (разминание и похлопывание одновременно).

Кресло оснащено функцией трехмерного сканирования тела для подборки индивидуального курса массажа.

Возможность изменения скорости массажа (5 уровней).

Возможность изменения высоты роликов по уровню шеи и плеч (10 уровней).

При массаже способом похлопывания, шиацу и постукивания возможно устанавливать 3 уровня ширины воздействия роликов по ширине спины.

Кресло имеет два режима управления: автоматический и ручной.

3 автопрограммы: общий массаж всей верхней части тела (массаж всей спины и поясницы, массаж шеи), массаж воротниковой зоны, массаж поясничного отдела.

4 профессиональных автопрограммы:

“Релакс” – это прекрасная оздоравливающая процедура, быстро снимающая усталость и восстанавливающая работоспособность, предупреждающая переутомление, создающая хорошее настроение для мобилизации перед трудной работой. Установочное время – 15 минут.

“Снятие боли” – разогревающий массаж, благоприятствует скорейшему достижению Вами наилучшей психической и душевной формы, усовершенствует Ваши физические возможности, увеличит физическую работоспособность, поможет бороться с утомлением. Установочное время – 15 минут.

“Устранение усталости” – Всего за 15 минут Вы получите максимальный эффект от массажа, забудете об усталости и болях в спине, не прилагая к этому ни каких усилий. Установочное время – 15 минут.

“Комфорт” – Это массаж, улучшающий работу органов и систем организма, способствующий снятию усталости и восстановлению работоспособности. Установочное время – 15 минут.

Ручной режим обеспечивает возможность самостоятельного выбора вида массажа, его интенсивность, скорость и область воздействия.


Массаж нижней части тела (массаж седалища, бедер, икр, голеней и акупунктурный массаж стоп). Функция воздушно-компрессионного массажа нижней части тела обеспечивается 33 воздушными камерами. Функция прогревания отделения для стоп и поясничного отдела с температурой нагрева до 40 С.

Дополнительная функция - растяжка голени.

Предназначение

- устраняет усталость
- облегчает боль в мышцах
- снимает напряжение в мышцах
- снимает нервную и мышечную усталость

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

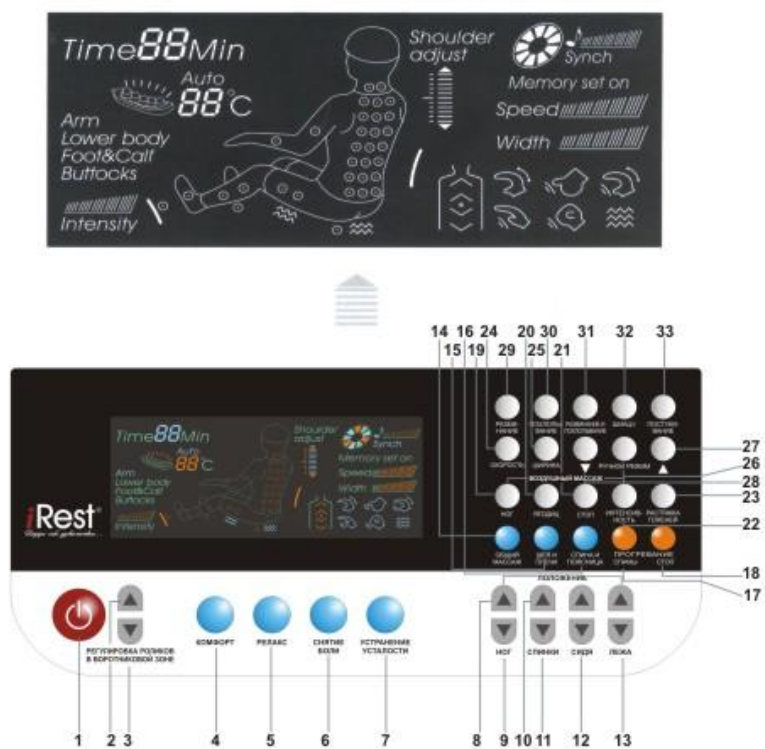


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перенос кресла.

Наклоните кресло на себя и убедитесь, что путь для движения свободен. Передвигайте кресло с помощью колесиков.

Предостережение: Не передвигайте кресло с помощью колесиков по деревянному полу, земле или в узком пространстве. Поднимите кресло для перемещения.

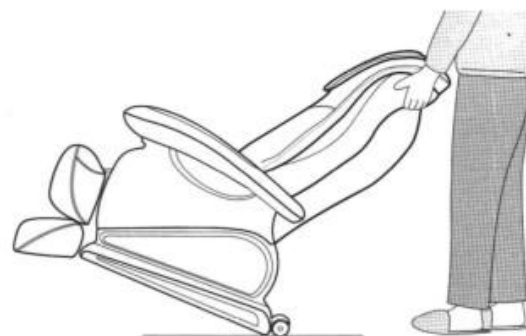

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: SL-A31

Наименование: Массажное кресло

Входное напряжение: AC 110-120V

60Hz


AC220-240V

50Hz

Мощность: 220W


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установка и использование пульта управления и мини-столика.
Установите на кресло пульт управления(1) Пульт управления может свободно наклоняться на 180 градусов(2) и вращаться на 360 градусов(3).

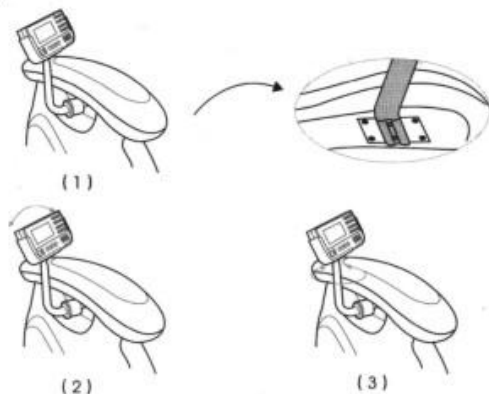

2. Регулировка и применение накидки и подушки кресла.
Вы можете использовать или снять накидку, которая может ослабить действие массажа шеи и плеч способом растирания, по вашему усмотрению (рекомендовано использовать накидку).
Накидка кресла присоединяется к спинке кресла при помощи молнии(1). Подушка присоединяется к накидке при помощи липучки(2)

Предупреждение: Не используйте кресло без накидки, так как это может причинить вам вред.

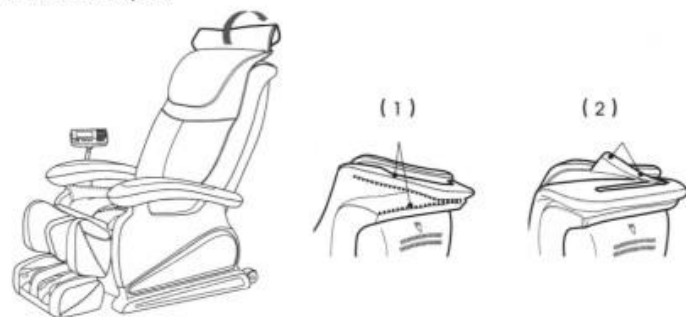

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

- 1) «Вкл./Выкл.» – включить/выключить массажное кресло;
- 2) «Регулировка роликов в воротниковой зоне» ▲ – изменение фиксатора положения роликового механизма по уровню шеи и плеч «вверх»;
- 3) «Регулировка роликов в воротниковой зоне» ▼ – изменение фиксатора положения роликового механизма по уровню шеи и плеч «вниз»;
- 4) «Комфорт» – автопрограмма «Комфорт»;
- 5) «Релакс» - автопрограмма «Релаксация»;
- 6) «Снятие боли» – автопрограмма «Снятие боли»;
- 7) «Устранение усталости» - автопрограмма «Снятие усталости»;
- 8) Положение ног ▲ – поднять отделение для ног;
- 9) Положение ног ▼ – опустить отделение для ног;
- 10) Положение спины ▲ – поднять спинку кресла;
- 11) Положение спины ▼ – опустить спинку кресла;
- 12) Сидя/Лежа – придать креслу положение сидя;
- 13) Сидя/Лежа – придать креслу положение лежа;
- 14) «Общий массаж» – Автопрограмма «Режим общего массажа»;
- 15) «Шея и Плечи» – Автопрограмма «Массаж воротниковой зоны»;
- 16) «Спина и Поясница» – Автопрограмма «Массаж поясничной зоны»;
- 17) «Прогревание спины» – прогревание поясничного отдела;
- 18) «Прогревание стоп» – прогревание стоп;
- 19) «Ноги» - включение/выключение воздушного массажа нижней части тела;
- 20) «Ягодицы» – включение воздушного массажа в области сиделища;
- 21) «Стопы» – включение воздушного массажа стоп;
- 22) «Интенсивность» - увеличение/уменьшение интенсивности воздушного массажа (2 уровня интенсивности);
- 23) «Растяжка голени» – включение/выключение растяжки голени;
- 24) «Скорость» – интенсивность массажа роликового механизма (5 уровней). Данная функция доступна только в ручном режиме;
- 25) «Ширина» – регулировка роликового механизма по ширине (3 варианта: широкое, среднее, узкое). Данная функция доступна только в ручном режиме (массаж поколачивание, похлопывание, шиацу);
- 26) «Ручной режим» – включение/выключение ручного режима массажа.
При включении данного режима необходимо выбрать вид массажа, область воздействия и скорость;
- 27) ▲ – перемещение массажного механизма «вверх»;
- 28) ▼ – перемещение массажного механизма «вниз»;
- 29) «Разминание» – массаж разминание;
- 30) «Похлопывание» – массаж похлопывание;
- 31) «Разминание и похлопывание» – комбинированный массаж (похлопывание и разминание одновременно);
- 32) «Шиацу» – массаж шиацу;
- 33) «Постукивание» - постукивание

ВИДЫ МАССАЖА

Массаж шиацу.

Восстанавливает энергетический баланс в организме человека.

Массаж разминание.

Усиливает кровообращение, снимает напряжение в мышцах, нормализует обмен веществ.

Массаж похлопывание.

Расслабляет мышцы и уменьшает их отечность. Оказывает на мышцы тонизирующий эффект, восстанавливает их работоспособность.

Массаж постукивание

Стабилизирует питательные и обменные процессы в области массируемого участка, повышает мышечный тонус.

Комбинированный массаж (разминание и похлопывание одновременно).

Улучшает общее состояние организма, снимает нагрузку с мышц, помогает активизировать защитные силы всего организма.

Воздушно-компрессионный массаж.

Специальные воздушные камеры для массажа в области сиденья, бедер, икр и стоп создают разминающий эффект нижней части тела, снимает с них мышечную усталость после физической загрузки и постоянное ощущение тяжести.

Акупунктурный массаж стоп - осуществляет эффективный и глубокий массаж ступней ног. Регулярное воздействие снимает боль, усталость, улучшает сон, снижает давление.

Прогревание стоп.

Прогревание стоп поможет расслабить мышцы ног и позволит убрать чувство разбитости и утомления.

Прогревание поясничного отдела.

Позволяет предотвратить и снять острые боли, предупреждает позвоночник и поясницу от лишних нагрузок.

ВЫБОР ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ


8)  - прогревание поясничного отдела


9)  - прогревание стоп;

19)  - включение/выключение воздушного массажа нижней части


тела;


20)  - включение воздушного массажа в области сиденья;



21)  - включение воздушного массажа стоп;

22)  - включение/выключение растяжки голени;

23) Регулировка положения кресла:

- «Положение ног»  - поднять/опустить отделения для ног




- «Положение спинки»  - поднять/опустить спинку кресла

- «Сидя/Лежа»   - придать креслу положение сидя/ положение лежа

· чтобы отрегулировать положение кресла нажмите и удерживайте кнопку.


Отпустите кнопку чтобы зафиксировать положение.


ВЫБОР ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ


1) «Вкл./Выкл.»  – включить/выключить массажное кресло. При включении кресла автоматически запускается процесс сканирования, после его окончания отрегулируйте расположение роликов по уровню шеи и плеч, затем выберите автоматический или ручной режим массажа. Выключить кресло: нажмите кнопку , чтобы отключить массажные функции, кресло автоматически вернется в исходное положение; после окончания сеанса массажа кресло выключается автоматически, нажмите кнопку «Сидя/Лежа» , чтобы вернуть кресло в исходное положение.


* не рекомендуется вставать с кресла, до момента остановки массажа;


* не рекомендуется вставать с кресла во время регулировки/возврата в исходное положение отделения для ног.


2)  - перемещение массажного механизма «вниз» (кнопка доступна в ручном режиме массажа). Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отрегулировать положение. Отпустите кнопку чтобы зафиксировать положение.

3)  - перемещение массажного механизма «вверх» (кнопка доступна в ручном режиме массажа). Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отрегулировать положение. Отпустите кнопку чтобы зафиксировать положение.

4)  – регулировка роликового механизма по ширине (3 варианта: широкое, среднее, узкое). Данная функция доступна только в ручном режиме (массаж поколачивание, похлопывание, шиацу);


5)  – регулировка интенсивности массажа спины (5 уровней). Данная функция доступна только в ручном режиме;

6)  – интенсивность воздушного массажа нижней части тела (сильный уровень воздействия);

7) «Регулировка роликов в воротниковой зоне»  – изменение фиксатора положения роликового механизма по уровню шеи и плеч «вверх», «вниз». Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отрегулировать положение. Отпустите кнопку чтобы зафиксировать положение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА



Перед началом массажа необходимо отрегулировать спинку кресла и отделение для ног в наиболее удобное положение.


Нажмите на кнопку , чтобы запустить процесс сканирования контуров позвоночника. По окончании процесса сканирования прозвучит специальный сигнал, в процессе звучания этого сигнала необходимо отрегулировать положение роликов в области шеи и плеч при помощи кнопки «Регулировка роликов в воротниковой зоне» , так, чтобы ролики не касались затылочной части головы. Выберите одну из трех автоматических программ общего массажа:



1. «Общий массаж» – автопрограмма «Режим общего массажа»;
2. «Шея/Плечи» – автопрограмма «Массаж воротниковой зоны»;
3. «Спина и Поясница» – автопрограмма «Массаж поясничного отдела»;

Также вы можете выбрать одну из 4-х профессиональных программ: 4)



Установочное время автопрограмм – 15 минут. При включении данных программ, автоматически включается массаж нижней части тела и вытяжка голени. Отключить данные функции можно при помощи кнопок  и  соответственно

либо уменьшить или увеличить интенсивность воздушного массажа при помощи кнопки  .

Дополнительно можно включить функции: прогревание отделения для стоп  и поясничного отдела .

Во время массажа на дисплее будут отображаться выполняемые функции, оставшееся время и локальные точки на которые будет осуществляться массаж.




По окончании сеанса массажный механизм автоматически возвращается в исходную точку. Затем необходимо вернуть спинку кресла и отделение для ног в исходное положение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНОГО РЕЖИМА

Перед началом массажа необходимо отрегулировать спинку кресла и отделение для ног в наиболее удобное положение.

Нажмите на кнопку , чтобы запустить процесс сканирования контуров позвоночника. По окончании процесса сканирования прозвучит специальный сигнал, в процессе звучания этого сигнала необходимо отрегулировать положение роликов в области шеи и плеч при помощи кнопок «Регулировка роликов в воротниковой зоне» , так, чтобы ролики не касались затылочной части головы.




Нажмите на кнопку , чтобы включить ручной режим управления массажными функциями. Выберите одну из трех программ ручной настройки (чтобы переключить программу нажмите кнопку ):

- «Фиксированный массаж» (на дисплее отобразится ) – массаж заданной точки спины, для перемещения массажного механизма «вверх», «вниз» нажмите кнопки «Вверх» , «Вниз»  соответственно.




Установив массажный механизм в нужной точке, выберите один из пяти видов массажа:  ШИАЦУ,  РАЗМИНАНИЕ,  ПОХЛОПЫВАНИЕ,  РАЗМИНАНИЕ И ПОХЛОПЫВАНИЕ,  ПОСТУКИВАНИЕ. Выберите интенсивность массажа нажав кнопку  СКОРОСТЬ (5 уровней). Настройте функцию «Ширина» нажав кнопку  ШИРИНА (3 уровня), данная функция доступна при выполнении массажа  ШИАЦУ,  ПОХЛОПЫВАНИЕ,  ПОСТУКИВАНИЕ.




* не рекомендуется выполнять массаж одной точки спины более 5 минут.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНОГО РЕЖИМА


- «Частичный массаж» (на дисплее отобразится ) – массаж определенной области спины. Переместите массажный механизм «вверх», «вниз» нажав кнопки «Вверх» , «Вниз»  соответственно.

Установив массажный механизм в нужной точке, выберите один из пяти видов массажа:  ШИАЦУ,  РАЗМИНАНИЕ,  ПОХЛОПЫВАНИЕ,  РАЗМИНАНИЕ И ПОХЛОПЫВАНИЕ,


 ПОСТУКИВАНИЕ. Выберите интенсивность массажа нажав кнопку  СКОРОСТЬ (5 уровней). Настройте функцию «Ширина» нажав кнопку  ШИРИНА

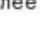


(3 уровня), данная функция доступна при выполнении массажа  ШИАЦУ,  ПОХЛОПЫВАНИЕ,  ПОСТУКИВАНИЕ.

- «Общий массаж спины» (на дисплее отобразится ) – массаж выполняется по всей области спины. При включении режима автоматически активируется функция «роликового массажа» - прокатывание роликов вдоль позвоночника. Настройте функцию

«Ширина» нажав кнопку  ШИРИНА (3 уровня). Выберите один из пяти

видов массажа:  ШИАЦУ,  РАЗМИНАНИЕ,  ПОХЛОПЫВАНИЕ,  РАЗМИНАНИЕ И ПОХЛОПЫВАНИЕ,  ПОСТУКИВАНИЕ. Выберите интенсивность массажа нажав кнопку  СКОРОСТЬ

(5 уровней). Настройте функцию «Ширина» нажав кнопку  ШИРИНА

(3 уровня), данная функция доступна при выполнении массажа  ШИАЦУ,  ПОХЛОПЫВАНИЕ,  ПОСТУКИВАНИЕ.